


beyond[®]
MAX[®]

New Generation
混和作業不要のホワイトニング材



 **beyond[®]** *Whitening*

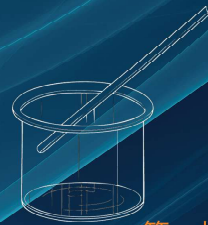

.....第一世代



.....第二世代



.....今、混和作業不要の第三世代へ

進化するホワイトニングへ

ビヨンドMAXは《過酸化水素35%》配合の歯科用漂白材です。
従来のケース内混和(第一世代)やシリンジ混和(第二世代)のような作業は一切不要!
専用の混合チップをシリンジに取り付けるだけで、すぐに歯面にジェルを塗布できます。



過酸化水素濃度

シリンジは1本ずつ密封個包装になっています。さらに、ジェルは歯面に塗布するまで空気に触れることがないので、過酸化水素濃度の低下を最小限に抑えます。

◆混合後の過酸化水素濃度の推移

	直後	5分後	10分後
H ₂ O ₂ 濃度	29.50%	28.61%	28.17%

製造所Beyond International Inc.にて

専用混合チップ

混和作業は不要!専用の混合チップで均一にオートミキシングが可能!

→安定した品質◎

専用の混合チップをシリンジに取り付けるだけで、すぐに歯面に塗布が可能!

→操作性◎

販売名 ビヨンドMAX

包装及び内容量	包装：5本入 内容量：1シリンジあたり2.6g (2.2mL)
付属品	混合チップ5個入り
保管条件	要冷蔵 2～8℃
使用期限	製造日より18か月
使用目的	本品は歯科医師管理下で、歯面を漂白するために用いる。

※仕様は予告なく変更されることがあります。

医療機器承認番号：30700B Z X 00024000
医療機器分類：高度管理医療機器



株式会社JBA 〒142-0063 東京都品川区荏原1-18-11 TEL：03-5755-5505

【製造販売業者】インサイシブジャパン株式会社 東京都品川区荏原1-18-11 TEL.03-6715-6133 【製造業者】Beyond International Inc.(U.S.A.)

